

Mammotome[®] Elite

Tetherless Vacuum-Assisted Biopsy System




Brindar confianza
en procedimientos desafiantes

Mammotome® Elite

Tetherless Vacuum-Assisted Biopsy System




El sistema Mammotome® Elite facilita la realización de biopsias mamarias guiadas por ultrasonido obteniendo muestras con una sola inserción, incluso en las lesiones más complejas, incluyendo masas pequeñas, masas mal definidas, masas cercanas a la pared torácica, tejido mamario denso, quistes complejos y microcalcificaciones.¹

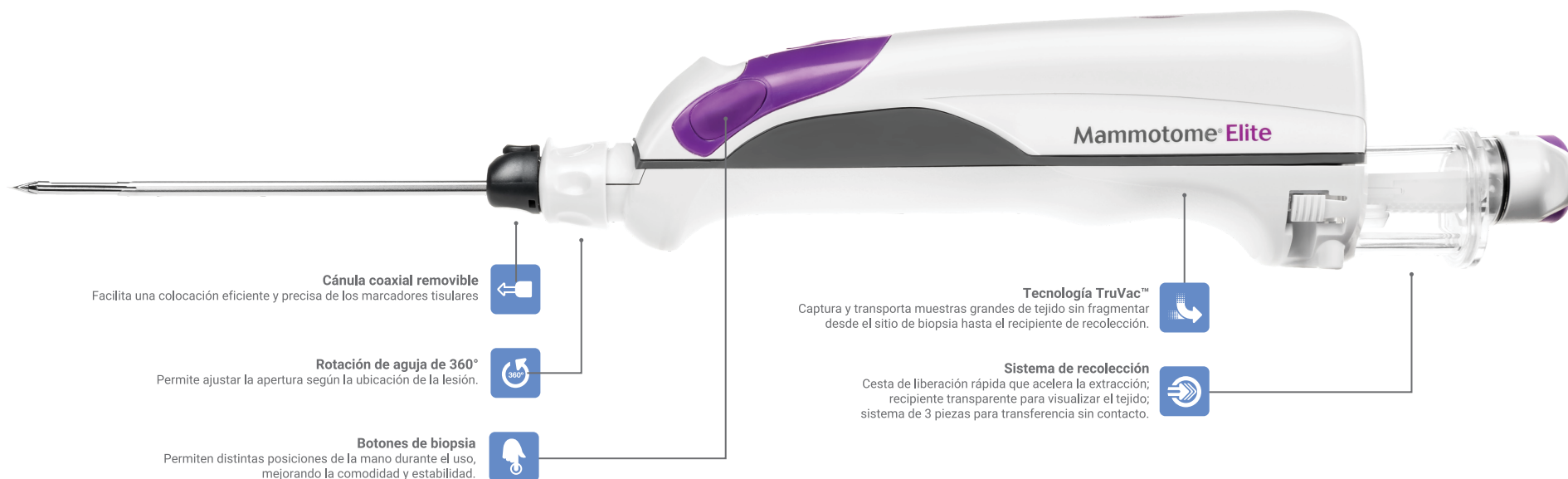

Inserción única
Punta afilada que atraviesa fácilmente el tejido, reduciendo el tiempo de navegación hacia la lesión.

Apertura de la sonda
Opciones de aguja 10G y 13G, se adaptan a las necesidades clínicas.

Visibilidad clara por ultrasonido
La sonda ecogénica permite una colocación más precisa de la aguja.

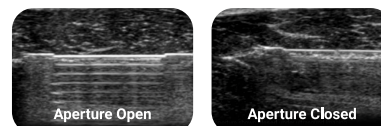

Estilete introductor
Diseño compacto con punta afilada para mayor control, el estilete introductor se alinea con la punta de la sonda para garantizar la colocación adecuada de la apertura.

Brindando confianza en procedimientos desafiantes

La asistencia por vacío, la hoja de corte afilada y el tamaño compacto del sistema Mammotome® Elite brinda mayor confianza y precisión incluso en entornos clínicos complejos.

83%

Reducción en la tasa de subestimación ²

11%

Mejora en la precisión ²



Información del Producto

Code	Description	Qty
MEH1	Mammotome® Elite Holster (includes charger base and power cord)	1
MEP10	10G Mammotome® Elite Ultrasound Probe	5
MEP13	13G Mammotome® Elite Ultrasound Probe	5
MEI10	10G Mammotome® Elite Introducer Stylet	5
MEI13	13G Mammotome® Elite Introducer Stylet	5

Coaxial Cannula



ATTRIBUTE	MEP10	MEP13
Gauge	9G	12G
Length	91.6mm	94.1mm
Diameter	3.6mm	2.8mm

Technical Specifications

Ultrasound Probe



ATTRIBUTE	MEP10	MEP13
Gauge	10G	13G
Needle Diameter	3.5mm	2.6mm
Needle Length w/o Coaxial Cannula	136mm	136mm
Needle Length w/ Coaxial Cannula	122mm	122mm
Aperture Length	19.1mm	18.4mm
Dead Space	10.0mm	10.4mm
Tip to Center	19.6mm	19.6mm

Introducer Stylet



ATTRIBUTE	MEI10	MEI13
Gauge	10G	13G
Needle Diameter	3.5mm	2.6mm
Needle Length	136mm	136mm

CorMARK® Biopsy Site Identifier

Expansión rápida del colágeno para una colocación precisa insuperable³



CALIBRE	FORMA	CÓDIGO
14G T		MAM3014
		MAM3015

T = TITANIUM

Los marcadores se venden por separado

Contacto



CORPORATIVO

Colegio #333, Col. Jardines del Pedregal,
Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México,
C.P. 01900.

CENTRO DE SERVICIO

Calzada de Tlalpan #4892 Col. Tlalpan,
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México,
C.P 14000, Tel: 01(55) 5513-9959

ventasremsa@remsamexico.com
www.remsamexico.com

Mammotome • mammotome.com

Para más detalles, consulte las instrucciones de uso o comuníquese con nosotros.

1. Based on clinical study, La Forgia, et al. (2020) and clinical case studies found on <https://www.mammotome.com/product-support/mammotome-elite-support/>
2. Data comparing the 13G Mammotom® Elite system to a 14G core needle device
3. MammoMARK® Device Test – PRC043442 Rev B, pgs. 2, 5-6: Collagen Expansion